


Umiestnenie elektród a označenie zvodov EKG

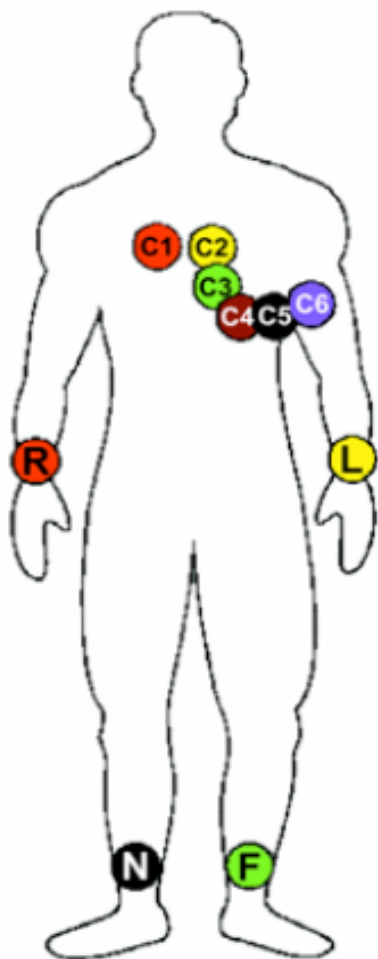

R pravá horná končatina (červená)

L ľavá horná končatina (žltá)

F ľavá dolná končatina (zelená)

N pravá dolná končatina (čierna)

C1 4. medzirebrie parasternálne vpravo (V1) (červená)

C2 4. medzirebrie parasternálne vľavo (V2) (žltá)

C3 medzi C2(V2) a C4 (V4) (V3) (zelená)

C4 5. medzirebrie medioklavikulárna čiara (V4) vľavo (hnedá)

C5 5. medzirebrie predná axilárna čiara (V5) vľavo (čierna)

C6 5. medzirebrie stredná axilárna čiara (V6) vľavo (fialová)

Zvody	Umiestnenie elektródy		Označenie elektródy	EKG zvody		Farba kábla
				bipolárne	unipolárne	
kočatí- nové	pravá horná končatina		R (RA)	I. (RA-LA)	aVR	Červená
	ľavá horná končatina		L (LA)	II. (RA-LF)	aVL	Žltá
	ľavá dolná končatina		F (LF)	III. (LF-LA)	aVF	Zelená
	pravá dolná končatina		N	uzemnenie		Čierna
hrudné	4. medzirebrie parasternálne	vpravo	a	V1	-	červená 1
	4. medzirebrie parasternálne	vľavo	b	V2	-	žltá 2
	medzi V2 a V4		c	V3	-	zelená 3
	5. medzirebrie MC čiara		d	V4	-	hnedá 4
	5. medzirebrie predná axilárna čiara		e	V5	-	čierna 5
	5. medzirebrie stredná axilárna čiara		f	V6	-	fialová 6 (modrá)
						Farba koncovky